

Xpert® Vorbereitung der HIV-1 VL Kartusche

- Xpert® HIV-1 Viral Load

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatt ist auf www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com abrufbar

Technischer Kundendienst von Cepheid
Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com

Büro Europa
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Vor Starten des Tests:


1. Die Probe nach Herstelleranweisung zentrifugieren, um das Plasma und die Erythrozyten zu trennen.
2. Die Probe Raumtemperatur (20 °C– 35 °C) erreichen lassen.
3. Das Plasma 15 Sekunden lang verwirbeln. Sollte die Probe trübe sein, im Quick-Spin-Modus klären.




- 1 Für jede Probe eine Xpert Kartusche nehmen.



- 2 Den Kartuschendeckel öffnen.

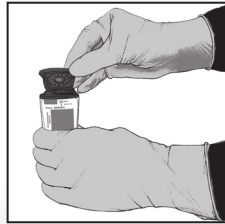


- 3 Das Plasma bis knapp über der 1-ml-Markierung an der Pipette aspirieren.

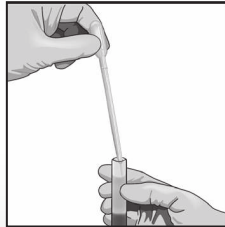

- 4 Den Inhalt in die Probenkammer geben.



- 5 Den Kartuschendeckel schließen.

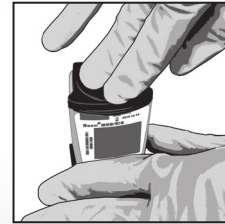

- 6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.