

# Xpert® Preparazione della cartuccia HPV

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda dei dati di sicurezza, visitare il sito [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Ufficio Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Ottenere un campione cervicale prelevato nel modo corretto e debitamente etichettato.

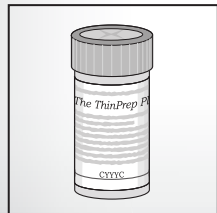

2 Procurarsi una cartuccia Xpert HPV e una pipetta di trasferimento (fornita in dotazione).

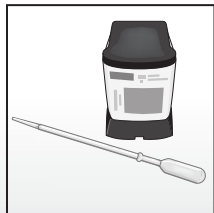

3 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.



4 Capovolgere delicatamente per 8-10 volte il flaconcino contenente il campione, oppure miscelare brevemente con un miscelatore vortex a velocità media per 5 secondi.



5 Riempire la pipetta di trasferimento con il campione, fino alla linea (1 ml).



6 Espellere il contenuto della pipetta nella camera riservata al campione.



7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



8 Introdurre la cartuccia e avviare il saggio.

