

# Preparazione della cartuccia Xpert® MTB/RIF - Campione di espettorato

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda di sicurezza, consultare il sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)



## Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Ufficio Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



- 1 Per ogni campione procurarsi una cartuccia Xpert MTB/RIF e un flaconcino di reagente per campioni. Estrarre la cartuccia dalla busta in alluminio.
- 2 Stimare il volume dell'espettorato. Aggiungere 2 parti di reagente per campioni al contenitore dell'espettorato.
- 3 Chiudere bene il contenitore e scuoterlo vigorosamente da 10 a 20 volte oppure agitarlo su vortex per 10 secondi. Incubare a temperatura ambiente per 15 minuti complessivi. Tra 5 e 10 minuti dall'inizio del periodo di incubazione, scuotere di nuovo vigorosamente da 10 a 20 volte oppure agitare su vortex per almeno 10 secondi.
- 4 Apporre un'etichetta sul lato destro o sinistro della cartuccia. Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.
- 5 Aspirare il campione liquefatto con una pipetta fino alla tacca indicatrice di 2 ml o appena al di sopra.
- 6 Svotare la pipetta nella camera della cartuccia riservata al campione.
- 7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.
- 8 Iniziare il test entro l'intervallo di tempo specificato nel foglietto illustrativo.

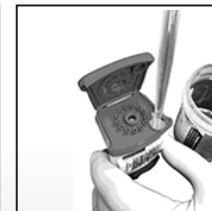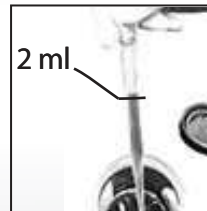

*Nota - un movimento avanti e indietro equivale a un singolo scuotimento.*