


Recogida por el médico de una muestra de hisopo rectal para uso con el kit de recogida de muestras de hisopos Xpert® – N.º de catálogo #SWAB/G-50


1

Lávese las manos antes de empezar. Abra el paquete de recogida **A** individual que contiene el tubo de reactivo de transporte del hisopo Xpert con tapa rosa y el hisopo de recogida envuelto individualmente. Deje el tubo a un lado antes de comenzar a recoger la muestra. Deseche el hisopo más grande **B**.

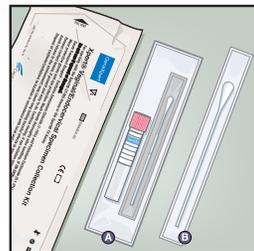

2


Abra el envoltorio del hisopo de recogida. Para ello, tire desde la parte superior del envoltorio. Retire el hisopo con cuidado de no tocar la punta ni apoyarlo en ningún lado.

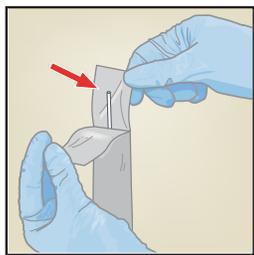

Si toca la punta suave, o el hisopo toca alguna superficie o se cae, use un nuevo kit de recogida.


3

Sostenga el hisopo con la mano, colocando el pulgar y el dedo índice en la mitad del mango del hisopo por la línea ranurada.

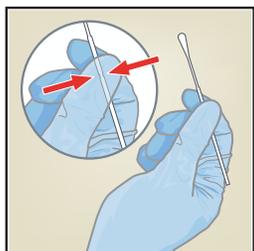

4

Inserte con cuidado el hisopo aproximadamente 1 cm más allá del esfínter anal (de manera que las puntas de fibra dejen de estar visibles) y gírelo suavemente.

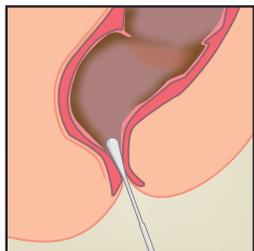


5




Mientras sostiene el hisopo con la misma mano, desenrosque la tapa del tubo de reactivo de transporte de hisopos Xpert. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, use un nuevo kit de recogida. Coloque inmediatamente el hisopo de recogida dentro del tubo de reactivo de transporte.

ATENCIÓN: Si se derrama el contenido del tubo sobre la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si le salpica el contenido del tubo en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua.

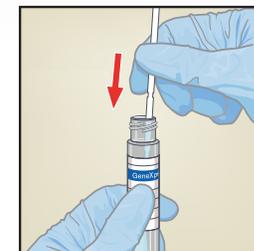


6

Tras identificar la línea ranurada del mango del hisopo de recogida, rompa con cuidado el mango del hisopo contra la pared del tubo por la línea ranurada y deseche la parte superior del mango del hisopo. Si es necesario, gire con cuidado el mango del hisopo para terminar de romperlo. Evite que el contenido salpique la piel. En caso de exposición, lave con agua y jabón.

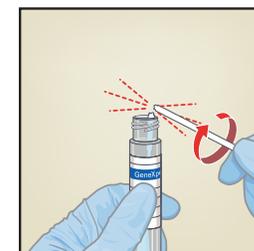

7

Vuelva a colocar la tapa del tubo de transporte y ajústela bien.

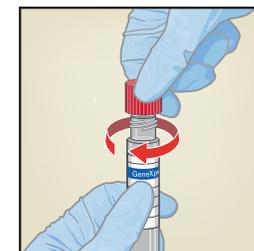

8

Invierta o agite suavemente el tubo 3 o 4 veces para eluir el material del hisopo. Evite que se forme espuma. Etiquete el tubo de transporte con la información requerida de identificación de la muestra, incluida la fecha de recogida.


La muestra debe transportarse a 2-30 °C.

Antes del análisis, la muestra puede conservarse durante un máximo de 60 días a 2-30 °C.

Recogida por el médico de una muestra de hisopo faríngeo para uso con el kit de recogida de muestras de hisopos Xpert® – N.º de catálogo #SWAB/G-50


1

Lávese las manos antes de empezar. Abra el paquete de recogida **A** individual que contiene el tubo de reactivo de transporte del hisopo Xpert con tapa rosa y el hisopo de recogida envuelto individualmente. Deje el tubo a un lado antes de comenzar a recoger la muestra. Deseche el hisopo más grande **B**.

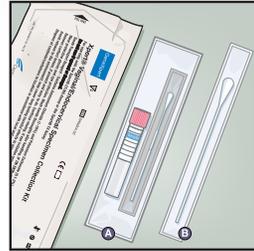

2


Abra el envoltorio del hisopo de recogida. Para ello, tire desde la parte superior del envoltorio. Retire el hisopo con cuidado de no tocar la punta ni apoyarlo en ningún lado.

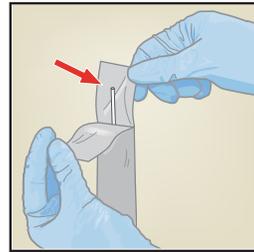

Si toca la punta suave, o el hisopo toca alguna superficie o se cae, use un nuevo kit de recogida.


3

Sostenga el hisopo con la mano, colocando el pulgar y el dedo índice en la mitad del mango del hisopo por la línea ranurada.

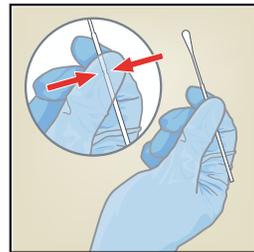

4

Pida al paciente que abra bien la boca. Coloque la lengua hacia la parte inferior de la boca. Pase el hisopo por zonas de la faringe (amígdalas, pared posterior, úvula).

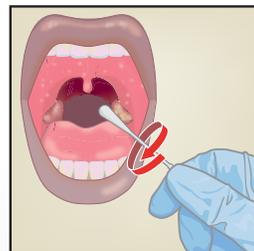


5




Mientras sostiene el hisopo con la misma mano, desenrosque la tapa del tubo de reactivo de transporte de hisopos Xpert. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, use un nuevo kit de recogida. Coloque inmediatamente el hisopo de recogida dentro del tubo de reactivo de transporte.

ATENCIÓN: Si se derrama el contenido del tubo sobre la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si le salpica el contenido del tubo en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua.

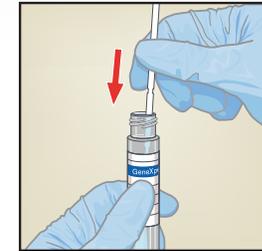


6

Tras identificar la línea ranurada del mango del hisopo de recogida, rompa con cuidado el mango del hisopo contra la pared del tubo por la línea ranurada y deseche la parte superior del mango del hisopo. Si es necesario, gire con cuidado el mango del hisopo para terminar de romperlo. Evite que el contenido salpique la piel. En caso de exposición, lave con agua y jabón.

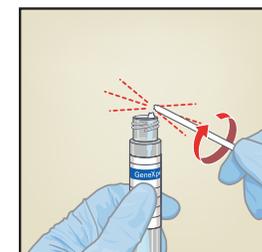

7

Vuelva a colocar la tapa del tubo de transporte y ajústela bien.

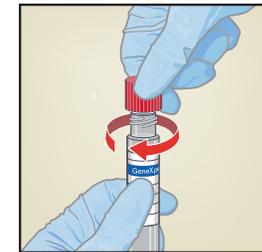

8

Invierta o agite suavemente el tubo 3 o 4 veces para eluir el material del hisopo. Evite que se forme espuma. Etiquete el tubo de transporte con la información requerida de identificación de la muestra, incluida la fecha de recogida.

La muestra debe transportarse a 2-30 °C.

Antes del análisis, la muestra puede conservarse durante un máximo de 60 días a 2-30 °C.